



МАКСИМАЛЬНА ЗУБНА КАПА

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВСТАНОВЛЕННЮ

ВАМ ЗНАДОБИТЬСЯ:

- Вода • Дзеркало
- Цифровий таймер
- Мікрохвильова піч
 - Кружка стандартного розміру, яка підходить для використання у мікрохвильовій печі
- Металева виделка

Подивіться відео по установці:
dentek.com/ultimatefit
посилання на відео по QR-коду



Спочатку ознайомтеся будь ласка повністю з інструкцією

Сподіваємось, що Вам сподобається Ваша нова зубна капа DenTek Максимальна.

Якщо Вам потрібна допомога, будь ласка відвідайте www.swisstrade.com.ua або зателефонуйте за тел.: 0 800 500 362 з 8:00 до 17:00 в робочий час

В УПАКОВЦІ:

- Формуючий лоток з капою
- Футляр
- Інструкція

1 ПІДГОТОВКА

- Зніміть футляр для зберігання та відкладіть в сторону.
- Переконайтеся, що синя капа надійно розташована в білому лотку, натиснувши на 2 подушечки для прикусу.
- Синя капа буде залишатися в білому формуючому лотку до Кроку 8.



2 НАПОВНІТЬ КРУЖКУ

- Для визначення правильної кількості води, помістіть формуючий лоток з капою в кружку і наповніть водою до лінії заповнення на ручці лотка (лоток і капа можуть плавати у воді).
- Після того, як кружка наповниться, **вийміть формуючий лоток з капою та відкладіть в сторону.**



3 ЗАКИП'ЯТИТЬ ВОДУ

У мікрохвильовій печі доведіть воду в кружці (без формуючого лотка і капи) до **сильного кипіння**. Бульбашки повинні підніматися з дна кружки і розриватися на поверхні. Час, необхідний для доведення води до сильного кипіння, може коливатися від 3 до 5 хвилин в залежності від потужності мікрохвильовки.



УВАГА: ВОДА І КРУЖКА БУДУТЬ ГАРЯЧИМИ

4 НАГРІЙТЕ КАПУ

- Помістіть формуючий лоток з капою у гарячу воду, при цьому синя капа **повинна бути направлена донизу**.
- Переконайтеся, що синя капа занурена під воду (при необхідності використовуйте виделку), і **зачекайте 3 хвилини 30 секунд**.
- Під час очікування, підготуйте дзеркало для Кроку 5.



3 хв. 30 с.

5 ФОРМУВАННЯ КАПИ

- Обережно вийміть формуючий лоток із капою з кружки і струсіть зайву воду. За допомогою дзеркала помістіть формуючий лоток з капою у рот і, не кусаючи, посуньте його так, щоб центруюча планка на формуючому лотку торкалася центру Ваших передніх зубів. Капа може бути гарячою, але вона дуже швидко охолоне.



3 хв.

СТРУСІТЬ ЗАЙВУ ВОДУ

- Сильно прикусіть.** Ваші зуби повинні глибоко заглибитися у капу. Потім м'яко натискайте протягом **3 хвилин**.



ПОСУНЬТЕ ЦЕНТРУЮЧУ ПЛАНКУ ТАК, ЩОБ ВОНА ТОРКАЛАСЯ ЦЕНТРУ ПЕРЕДНІХ ЗУБІВ




СИЛЬНО ПРИКУСІТЬ. УТРИМУЙТЕ 3 ХВ.

6 ПЕРЕВІРТЕ ВСТАНОВЛЕННЯ

Повільно відкрийте рот. Якщо капа встановлена правильно, лоток і капа залишатимуться надійно прикріпленими до Ваших верхніх зубів.

Якщо капа встановлена неправильно, лоток і капа спадуть з верхніх зубів. Залиште капу у лотку та поверніться до Кроку 1.

Обережно потягніть лоток і капу донизу, а потім вийміть.

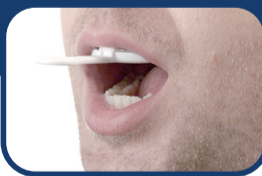

Правильно ✓



Неправильно ✗

7 ЗАКРІПІТЬ ФОРМУ КАПИ

Помістіть лоток і капу догори дном у посудину з водою кімнатної температури на **5 хвилин** для закріплення форми капи.




5 хв.

8 ВИТЯГНІТЬ КАПУ З ЛОТКА

Витягніть капу з лотка, повільно потягнувши за центр сполучної смуги, щоб капа вискочила.

ТЕПЕР ВАША ЗУБНА КАПА ГОТОВА ДО ВИКОРИСТАННЯ

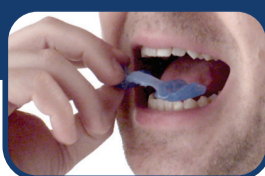

ЯКЩО У ВАС ЗАЛИШИЛИСЯ ПИТАННЯ З ВСТАНОВЛЕННЯ КАПИ, БУДЬ ЛАСКА ПОДЗВОНІТЬ НАМ ЗА ТЕЛ.: 0 800 500 362 (з 8:00 до 17:00 в робочий час)



МАКСИМАЛЬНА ЗУБНА КАПА

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Після кожного використання необхідно очистити зубну капу за допомогою зубної пасти і/або ополіскувача для порожнини рота. Капу також можна очищувати за допомогою засобу DenTek Fresh Guard®, спеціально розробленого для очищення зубних пристроїв. Ніколи не опускайте і не промивайте капу під гарячою водою, оскільки це може змінити форму зубної капи.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

DenTek Максимальна Зубна капа показана до застосування для захисту від бруксизму або нічного скреготіння зубами. Вона призначена для зменшення пошкодження зубів і зменшення шуму при бруксизмі або скреготі зубами.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ У НАСТУПНИХ ВИПАДКАХ:

- Як спортивну захисну капу. Ця продукція призначена для протидії вертикальному тиску, але не захищає від ударної дії.
- Якщо Вам не виповнилося 18 років.
- Більше трьох місяців без консультації стоматолога.
- Якщо у Вас немає декількох зубів або є розхитані зуби.
- При болю в нижньощелепному суглобі (СНЩС), діагностованому стоматологом, або при хрускоті у щелепах.
- При болю, викликаному внаслідок скреготіння зубами, або при зубному або щелепному болю і ншого походження.
- Якщо у Вас є зубні імпланти, або Ви носите зубні протези, брекети чи інші ортодонтичні апарати.

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ КАПИ ПРОКОНСУЛЬТУЙТЕСЯ ЗІ СТОМАТОЛОГОМ ЯКЩО У ВАС Є:

- Серйозні проблеми зі здоров'ям або серйозні порушення дихальної функції.
- Виразки у ротовій порожнині, кровоточивість ясен або будь-які захворювання ясен.
- Незапломбовані зуби або пломби, що випали.
- Труднощі при жуванні, щелепний, зубний або лицьовий біль.

ПРИПИНІТЬ ВИКОРИСТАННЯ І ПРОКОНСУЛЬТУЙТЕСЯ ЗІ СТОМАТОЛОГОМ, ЯКЩО:

- У Вас виникають хворобливі відчуття, змінюється зовнішній вигляд ясен, з'явилася кровоточивість ясен або будь-яка інша реакція в роті.
- У Вас з'являється щелепний біль, зубний біль, вушний біль, головний біль, оніміння шиї або хрускіт в суглобах при використанні цього продукту.
- Зазначені симптоми зберігаються більше місяця використання.
- Капа легко випадає у Вас з рота.
- Капа заважає дихати, створює дискомфорт або викликає блювотні позиви.
- Зміна прикусу зберігається більше кількох хвилин після зняття капи.

Користувачі можуть відчувати задуху або нудоту під час використання цього продукту. Якщо це сталося, припиніть користування та зверніться за медичною допомогою. Відвідайте стоматолога кожні 6 місяців.

Зубна капа виготовлена виключно з матеріалів з підтвердженою безпекою та ефективністю. Вони не містять бісфенолу-А (BPA), латексу і фталатів. Матеріали пройшли тестування на біосумісність і не містять ніяких небезпечних або токсичних хімічних речовин.

ЗАМІНА ВАШОЇ ЗУБНОЇ КАПИ

Всі зубні капи з часом вимагають заміни. Будь ласка, перевіряйте Вашу зубну капу на знос щомісяця. Термін служби Вашої зубної капи DenTek® залежить від того, як часто і з якою силою відбувається у Вас скрегіт зубів.

0800 500 362

info@swisstrade.com.ua

www.swisstrade.com.ua



Виготовлено для DenTek Oral Care, Inc., Teppitau, NY 10591
Входить до групи компаній Prestige Consumer Healthcare.
Всі права зарезервовано. Виготовлено у США.
©2019 Торговельне оформлення належить DenTek Oral Care, Inc.
DKUS136601

ТАКОЖ РЕКОМЕНДУЄМО

